





ART³: UNA NUEVA FORMA DE OBTURACIÓN BULK FILL

Consiga restauraciones naturales con la nueva generación de tecnología de respuesta adaptativa (ART) probada en la clínica e incorporada a Harmonize™ y al composite Universal SimpliShade. Gracias a su tecnología de respuesta adaptativa ternaria mejorada, SimpliShade Bulk Fill es fácil de manipular y muestra una baja contracción.

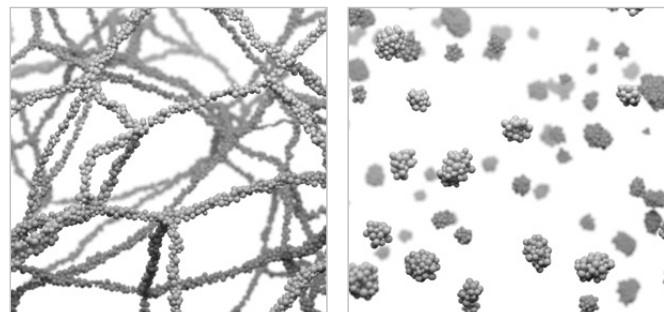

Tecnología de respuesta reológica adaptativa para un modelado sencillo

ART³ utiliza modificadores reológicos que reducen la viscosidad del composite a medida que se manipula. Una vez modelada la anatomía, la viscosidad se recupera y la anatomía se estabiliza antes de la fotopolimerización, lo que reduce la necesidad de volver a dar forma.

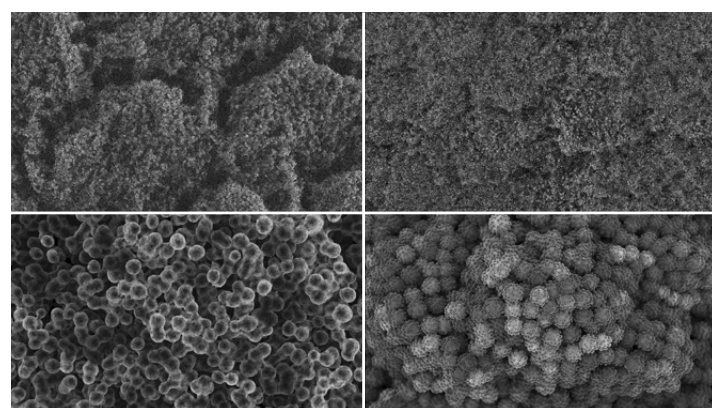


Esmalte humano

SimpliShade Bulk Fill

Tecnología de respuesta cromática adaptativa para una integración perfecta

Consiga un efecto de integración excepcional con nanorrellenos especiales que imitan las estructuras del esmalte e interactúan con la luz de forma natural. La restauración y el diente se hacen prácticamente indistinguibles.

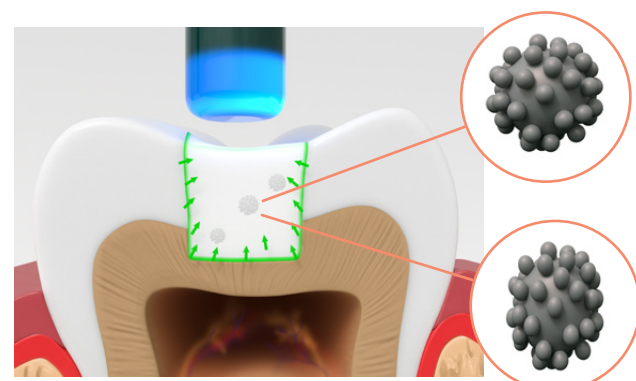

Tecnología de respuesta adaptativa a la tensión de contracción para unos resultados duraderos

Durante la polimerización, entra en acción la resina de baja contracción y el innovador diseño de nanorrelleno de SimpliShade Bulk Fill. Los nanorrellenos infundidos en la resina aumentan su elasticidad, reduciendo las tensiones, y su revestimiento especial reduce la tensión en la interfase. Aunando tres mecanismos de reducción de la contracción, se mejora la adaptación marginal y la integridad, minimizando la tensión de la restauración de composite sobre la capa adhesiva, para una mejor adaptación marginal.

Información para pedidos



SimpliShade Bulk Fill

N.º art. Descripción del artículo

37211	SimpliShade Bulk Fill Composite, jeringa
37212	SimpliShade Bulk Fill Composite Unidose, envase de 20 monodosis

QUÉDESE EN FAMILIA

con nuestra línea completa de productos SimpliShade



SimpliShade Bulk Fill Flow

N.º art. Descripción del artículo

37217	SimpliShade Bulk Fill Flow, jeringa
37218	SimpliShade Bulk Fill Flow Unidose, envase de 20 monodosis



SimpliShade Universal Composite

Monodosis

N.º art. Descripción del artículo

37006	Light - envase de 20
37007	Medium - envase de 20
37008	Dark - envase de 10
37009	Bleach White - envase de 10
37010	Universal Opaque - envase de 10


Jeringa

N.º art. Descripción del artículo

37001	Light
37002	Medium
37003	Dark
37004	Bleach White
37005	Universal Opaque



Para un acabado de alto brillo, utilice la línea de pulidores Kerr.

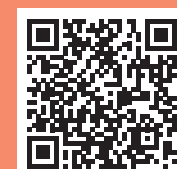

Para más información, escanee el código QR o visite go.kerrdental.com/simplishadebulkfill

SimpliShade™ BULK FILL



Simplicidad con solo un tono y un paso

Conseguir restauraciones perfectas es ahora más fácil con SimpliShade™ Bulk Fill. Puede omitir el recubrimiento final con la colocación en un solo paso y reducir los requisitos de inventario utilizando un solo tono para los 16 tonos de la escala VITA® classical. Gracias a la tecnología de respuesta adaptativa ternaria (ART³), SimpliShade Bulk Fill es fácil de manipular y presenta una baja tensión de contracción.



Más información sobre ART³ y su efecto sobre la tensión de contracción

kerrdental.com

©2023 Kerr Corporation. SimpliShade y Harmonize son marcas comerciales de Kerr Corporation. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Datos de archivo. MKT-22-0879-ES

Kerr™

Kerr™

UN TONO ES TODO LO QUE NECESITA

Consiga la adaptabilidad, durabilidad, profundidad de polimerización y simplicidad que necesita con SimpliShade Bulk Fill.

SimpliShade™ Bulk Fill está indicado para restauraciones de clases I-V, es decir, restauraciones directas en dientes anteriores y posteriores, reconstrucción de muñones y reparación de defectos de restauraciones.



Sistema de un tono

Con un tono que combina a la perfección con los 16 tonos VITA® classical, SimpliShade Bulk Fill le ahorra tiempo de toma del color y de gestión del inventario.



Un paso

Prescinda de la capa de recubrimiento final, realice las restauraciones con un composite SingleFill™. Con su mecanismo mejorado de polimerización, SimpliShade Bulk Fill le permite alcanzar fácilmente profundidades de polimerización de hasta 5 mm en un solo paso.



Simplicidad y durabilidad

En comparación con otros materiales de obturación bulk fill del mercado, SimpliShade Bulk Fill muestra una menor tasa de desgaste y una mayor resistencia a la flexión, con una tensión de contracción comparable, haciendo sus restauraciones más fuertes y duraderas.




Efecto camaleónico


Su arquitectura especial de nanorrelleno imita la estructura del esmalte natural e interacciona con la luz para hacerse prácticamente imperceptible.

Resistencia a la flexión

SimpliShade Bulk Fill muestra una resistencia a la flexión comparable o superior a la de Competidor 1 y Competidor 2, lo que se traduce en una mayor resistencia al astillado y a la fractura con el tiempo.

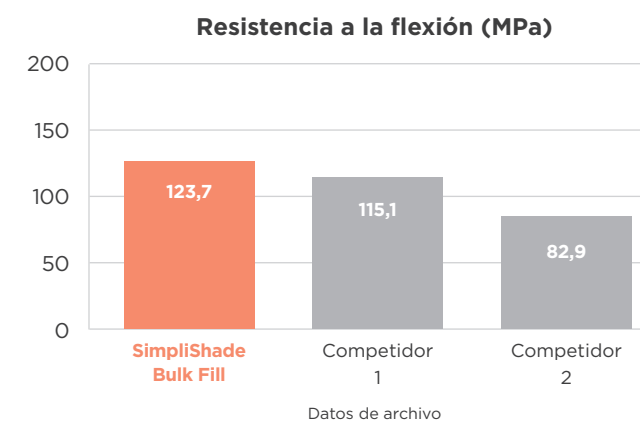

Tensión de contracción (a los 2 min.)

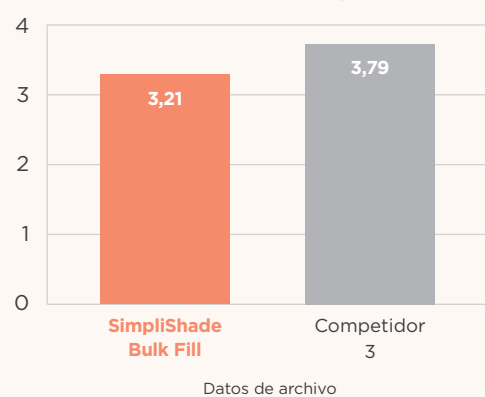


Tensión de contracción


SimpliShade Bulk Fill posee una tensión de contracción comparable a la de Competidor 3, lo que supone una menor degradación marginal y una menor sensibilidad postoperatoria, para restauraciones duraderas.

Tasa de desgaste

SimpliShade Bulk Fill tiene la menor tasa de desgaste comparado con Competidor 3, Competidor 1 y Competidor 2. Esta baja tasa de desgaste se traduce en unas restauraciones que resistirán mejor las fuerzas masticatorias, el cepillado y otras cargas.

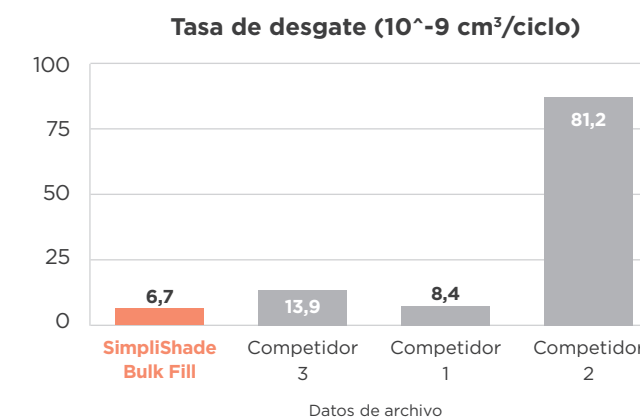

Brillo inicial (GU)

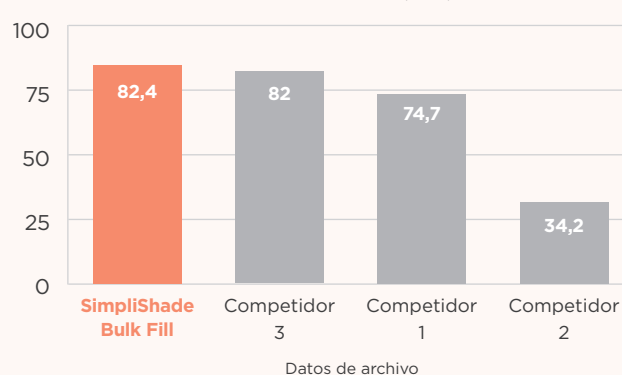


Brillo inicial

SimpliShade Bulk Fill tiene un brillo inicial comparable al de Competidor 3 y superior al de Competidor 1 y Competidor 2, dando como resultado restauraciones más estéticas.




Propiedades de manipulación

La tecnología de respuesta reológica adaptativa reduce la viscosidad durante la manipulación para facilitar el modelado y la creación de anatomías.

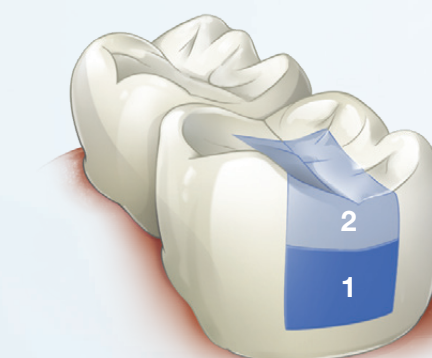

Usando un composite fluido (1) y aplicando encima SimpliShade Bulk Fill (2)

Mejore el sellado y la adaptación aplicando un composite fluido para revestimiento de cavidad (hasta 2 mm). A continuación, rellene las cavidades de forma práctica y sencilla con SimpliShade BF hasta 5 mm.

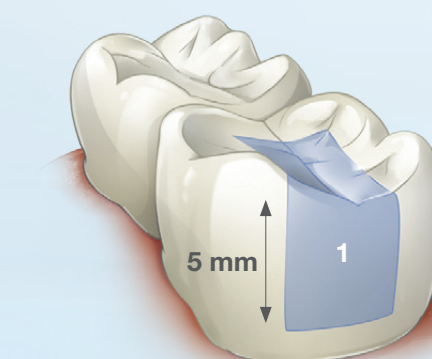

Usando solo Bulk Fill para 5 mm

Rellene cavidades de hasta 5 mm de forma práctica y sencilla con SimpliShade BF.